




Lumenis One™

Plataforma Guiada de Tratamiento

El PODER de la tecnología del mañana HOY

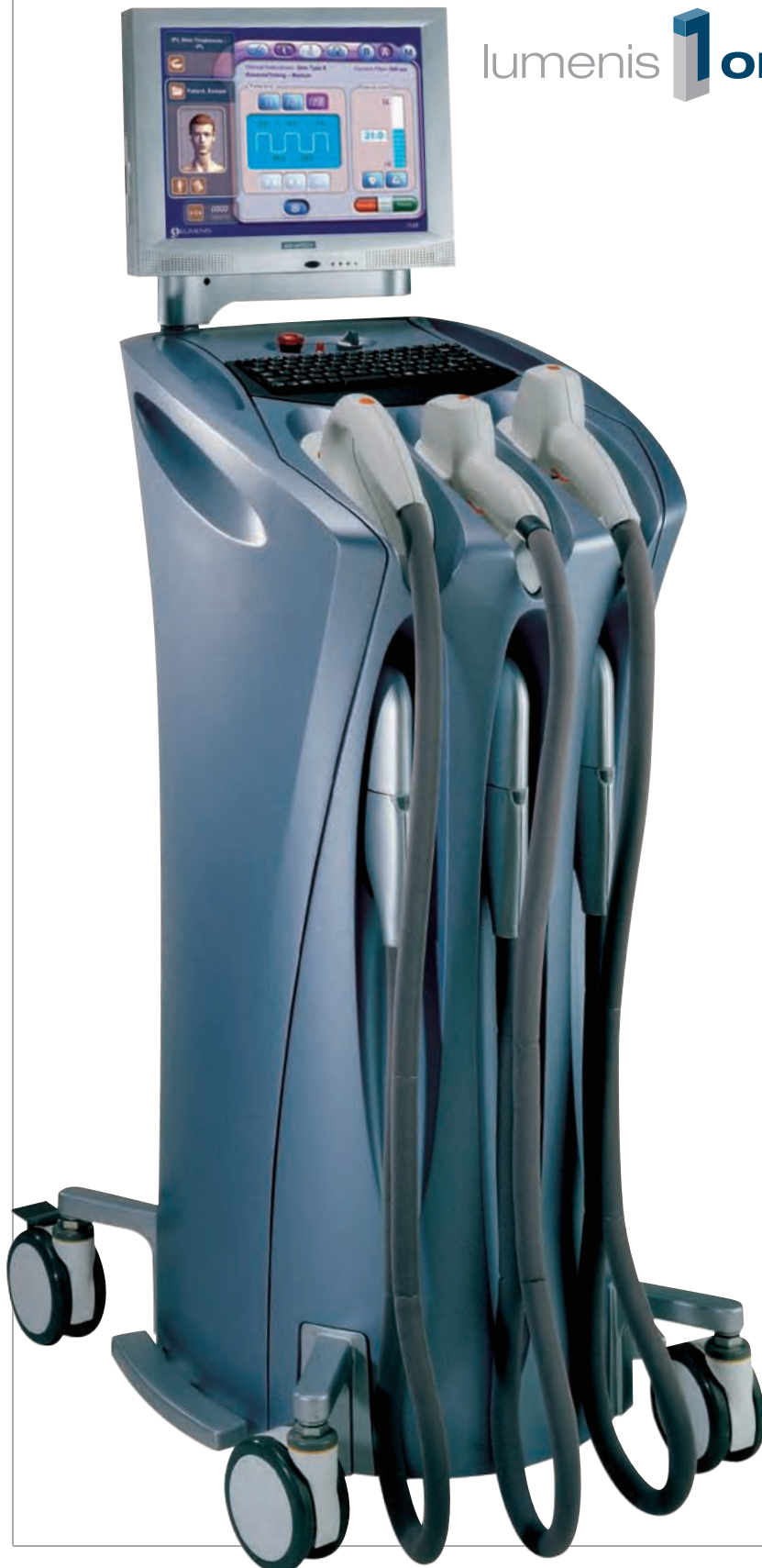

lumenis **1**one™

Creciendo con usted

La versatilidad de la plataforma Lumenis One asegura su inversión y su crecimiento según las necesidades de su práctica. Su diseño y sus recursos aseguran un flujo consistente de las nuevas aplicaciones y actualizaciones..

Creciendo su práctica

Software para selección guiada de parámetros

- Modos básicos y avanzados para los diferentes niveles de experiencia del usuario
- Más de 1500 parámetros de tratamientos pre-programados para tratar más de 30 condiciones
- Pantalla táctil de fácil uso

Base de datos para paciente


- Base de datos para paciente, almacenamiento de gráficos, seguimiento de pacientes así como de información sobre los tratamientos
- Compatible con Microsoft Office

Plataforma expandible

- La plataforma modular de Lumenis One proporciona la opción de añadir nuevas tecnologías para expandir su práctica.
- Sistema con un espacio eficiente que elimina la necesidad de dispositivos separados

la precisión se volvió **SIMPLE**

Interfase de pantalla táctil

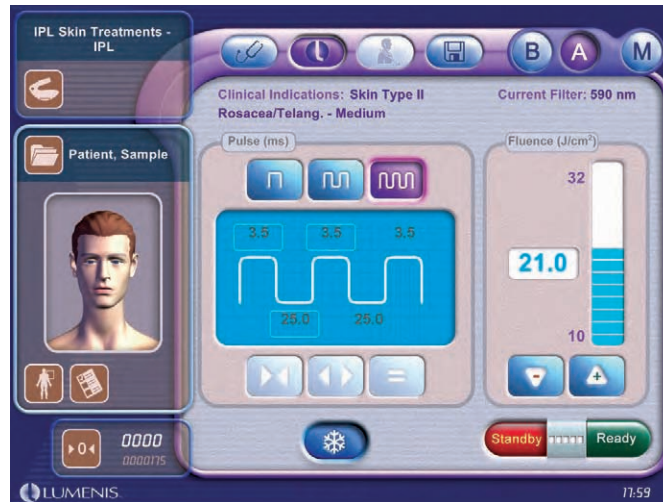

SOFTWARE GUIADO PARA SELECCIÓN DE PARÁMETROS



- 1 Seleccione la condición y dispositivo de entrega
- 2 Seleccione parámetros, incluyendo, tipo de piel, tipo de lesión, ancho, profundidad o textura

El software de selección guiada de parámetros le ayuda a navegar hacia el lugar exacto, tanto si es un nuevo médico o alguien con mucha experiencia.

BASE DE DATOS DE PACIENTES



- 1 Localice el historial de cada paciente
- 2 Apruebe u optimice la configuración de los archivos

Localice el historial de cada paciente en una base de datos completa HIPAA compatible con 10, 000 pacientes y complementada con notas, valores anteriores y otros tratamientos. Sin errores ortográficos.

Universal IPL®

Una cabeza de tratamiento para todas las aplicaciones IPL*



Tecnología óptima de pulsos (OPT) para máximos resultados


Lumenis One IPL con OPT logra resultados en 1 tratamiento comparables a los alcanzados en 3 a 5 tratamientos con otras tecnologías.¹

Pulso y fluencia correctas en cada aplicación - Sólo Lumenis One IPL con OPT puede entregar fluencias bajas y altas, sobre toda la gama de pulsos cortos o largos con seguridad y eficacia para el tratamiento de la más amplia gama de pacientes.

* Rejuvenecimiento de la piel usando el Fotorejuvenecimiento, rosácea, telangiectasias, lesiones vasculares, hemangiomas, manchas vino de oporto, venas, manchas de sol, lesiones epidérmicas pigmentadas, poikiloderma de civate, depilación permanente y reducción de vello

¹ La mejoría clínica de fotodaño en la piel después de un tratamiento con Luz Intensa Pulsada. *The American Journal of Cosmetic Surgery* Vol. 24, No. 1, 2007.

Guías de enfriamiento de Zafiro

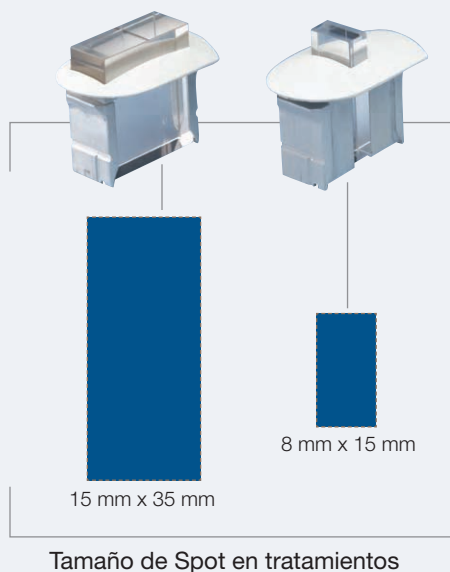


Lumenis One IPL: El verdadero dispositivo multi-aplicación

Aplicación	Filtro
Pigmentación	515nm, 560nm
Nivel de Rosácea	515nm
Tratamientos de piel IPL (pigmentados y vasculares)	560nm, 590nm
Venas faciales grandes	590nm, 615nm
Lesiones vasculares gruesas (angiomas y hemangiomas)	695nm, 755nm
Depilación piel clara	695nm
Depilación piel oscura	755nm
Venas superficiales en piernas	640nm, 695nm, 755nm
Estimulación de colágeno	755nm

El primer y único IPL de CUARTA generación®

7 ExpertFiltros
Cabeza
Universal para
Tratamientos IPL

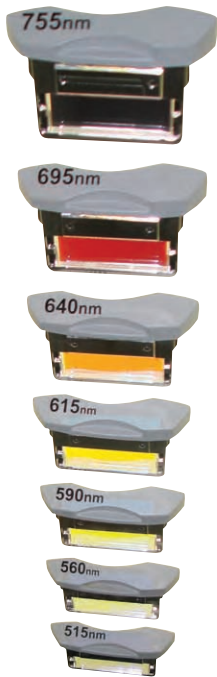

- **Cabeza de tratamiento universal IPL**

- Una sólo cabeza versátil para todas las aplicaciones de IPL
- Fácil de usar, no necesita cambiar la cabeza de tratamiento durante el cambio de aplicaciones
- Diseño que ahorra espacio, sin necesidad de almacenar varias cabezas de tratamiento

- **7 ExpertFiltros que le permiten optimizar tratamientos**

- Filtros estándar de 515, 560, 590, 615, 640, 695, 755 nm
- Reconocimiento de filtros por computadora que reducen el riesgo de error

- **Rápido** -1 segundo de repetición, gran tamaño de spot (15 mm x 35 mm)

- **Enfriamiento de contacto con 2 guías de luz de zafiro.**

- Aumenta la comodidad del paciente
- Incrementa la duración de la luz guía
- Spots de tratamiento de 15 mm x 35 mm y 8 mm x 15 mm para tratamientos eficaces de cada sitio de tratamiento.


- **Calibración incorporada** - para entrega de energía consistente todo el tiempo

DAÑO DE SOL (CARA)

ANTES



DESPUÉS

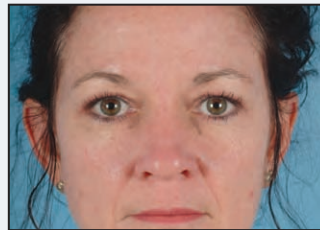

1 tratamiento
Cortesía del Dr. Corey Mass

DAÑO DE SO (ESCOTE)

ANTES



DESPUÉS



1 tratamiento
Cortesía del Dr. Basmat Zamir

LightSheer®

El estándar de oro de la tecnología de diodo para la depilación láser

El sistema de depilación láser más probado y aceptado del mundo

- **Aprobado por la FDA** para la reducción permanente de vello en todos los tipos de piel (I-VI), piel bronceada, y tratamiento de la PFB
- **Control único de salida** que permite el tratamiento de casi todos los diámetros y color de vello
- **Avanzada punta de contacto de zafiro**, que asegura comodidad al paciente y proporciona enfriamiento de contacto integral, antes, durante y después del pulso láser.
- **Calibración integrada** para la entrega precisa de energía todo el tiempo
- **Sistema de diodo** diseñado para garantizar los tratamientos a los pacientes en horario y fecha previstas
- **Sin consumibles**



BARBILLA

ANTES



DESPUÉS



46 meses después del último tratamiento
Cortesía de: Dra. Valeria B. Campos, Dra. Christine C. Dierlckx, Dr. R. Rox Anderson, Weisman Laboratories of Photomedicine, Harvard Medical School, Boston, MA

PIERNA

ANTES



DESPUÉS



24 después del último tratamiento
Cortesía de: Dra. Valeria B. Campos, Dra. Christine C. Dierlckx, Dr. R. Rox Anderson, Weisman Laboratories of Photomedicine, Harvard Medical School, Boston, MA


Multi-Spot™ Nd:YAG

Tratamiento de lesiones vasculares y venas en piernas

- **Aprobación por la FDA** para el tratamiento de venas en piernas, telangiectasias grandes, hemangiomas y tratamiento no ablativo de arrugas
- **3 tamaños de spot; 2 mm x 4 mm, 6 mm y 9 mm**
 - Proporciona tratamientos precisos
 - guía de reconocimiento de luz por computadora
 - contacto de enfriamiento de zafiro- que aumenta la comodidad del paciente
 - luz guía de alta duración
- **Calibración incorporada-** para entrega de energía consistente todo el tiempo
- **Velocidad de tratamiento** que resulta mayor rendimiento en pacientes tratados



Guías de Enfriamiento de Zafiro

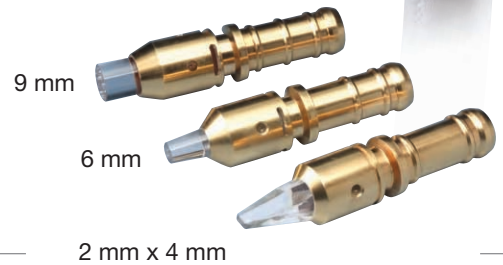

VENAS EN PIERNAS

ANTES




DESPUÉS



2 tratamientoss
Cortesía del Dr. Basmat Zamir

HEMANGIOMA CEREZA

ANTES

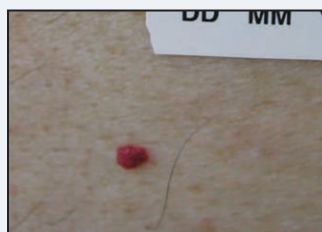

DESPUÉS



1 treatment
Cortesía del Dr. Basmat Zamir

Especificaciones

Sistema Lumenis One™

Tamaño	159 cm x 47 cm x 67 cm
Peso	154 kg
Requerimientos eléctricos	100-230 VAC ±10%, 25/16 A, 50/60 Hz Fase Simple. Línea Dedicada.



Universal IPL®

Aplicaciones	Tratamientos en piel IPL; lesiones vasculares, lesiones pigmentadas, depilación
Espectro	515-1200 nm
Densidad de Energía	1-40 J/cm²
Duración de Pulso	3-100 ms
Repetición de Pulso	1-120 ms
Características de Pulso	Pulso múltiple secuencial
Velocidad de Repetición	Hasta 1 Hz
Tamaño de Spot	15 mm x 35 mm, 8 mm x 15 mm
Enfriamiento	Contacto de enfriamiento continuo



LightSheer®

Espectro	Depilación, reducción permanente de vello, Pseudofolliculitis Barbae
Fluencia	800 nm
Duración de pulso	10-100 J/cm²
Repetición de pulso	5-400 ms
Tamaño de spot	Hasta 2 Hz
Enfriamiento	




Multi-Spot™ Nd:YAG

Aplicaciones	Venas en piernas, lesiones vasculares profundas, tratamientos de manchas faciales no ablativas
Espectro	1064 nm
Densidad de energía (Fluencia)	10-225 J/cm²
Duración de Pulso	2-20 ms
Velocidad entre pulsos	5-100 ms
Características del pulso	Pulso secuencial-múltiple
Velocidad de repetición	Hasta 1 Hz
Tamaño de spot	2 mm x 4 mm, 6 mm, 9 mm
enfriamiento	Contacto de enfriamiento continuo

Lumenis Inc.
 Santa Clara, CA, USA
 Tel +1 408 764 3000
 +1 877 586 3647
 Fax +1 408 764 3999
 +1 800 505 1133

México, D.F.
 Tel + 55 5211 0793
 Fax + 52 5211 0784
www.adisat.com

ADISAT

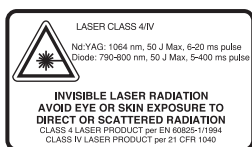

Ensure Compliance with Government Safety and Performance Standards
1-877-LUMENIS (1-877-586-3647)
 Outside USA, visit www.lumenis.com, click 'Service & Support'