

Stellar M22

Shine on



El futuro de los
tratamientos
para la piel
inicia ahora.

Brilla

Hay tanta gente como estrellas en el cielo.

Cada uno diferente.

Cada uno especial.

Para cualquiera en el planeta, Stellar M22™ puede cambiar su mundo.

Rejuvenece la piel de la mejor manera posible, se sentirán bien, se sentirán seguros.

Se sentirán como una estrella.

Brilla.



Con el Stellar M22, el cielo es el límite.

Stellar M22 es una potente plataforma modular de múltiples aplicaciones, inspirada en la constelación más brillante del cielo.

Le permite tratar de manera segura y efectiva diferentes indicaciones en diferentes tipos de piel, edad y género, sin la necesidad de productos desechables.

Stellar M22 te empoderará para tratar a más pacientes y expandir su negocio, creando una clara ventaja competitiva para su práctica.

El sistema es totalmente actualizable, por lo que a medida que su negocio crece, Stellar M22 puede adaptarse y crecer con él.



Ofrecer un enfoque de tratamiento verdaderamente holístico.



Atrae a más pacientes



Benefíciense de un rápido retorno de las inversiones.

Permita que todos brillen

Stellar M22 le permite tratar a más pacientes y expandir su negocio. Descubre el infinito posibilidades disponibles con el Stellar M22 para estos tratamientos clave y muchos más:

Photofractional™

Tratamiento secuencial de IPL y ResurFX™ para la textura y el tono de la piel, para una mejor apariencia general de la piel.

Pigmentación y tatuajes

Tratamiento no invasivo para reducir pigmentaciones y tatuajes no deseados.

Tratamientos de Textura

Solución fraccionada de rejuvenecimiento de la piel para mejorar la textura de la piel.

Lesiones vasculares

Tratamiento no invasivo para las venas de las piernas, venas faciales, capilares rotos, rosácea y enrojecimiento.

Acne

Tratamiento suave de IPL que aborda tanto la bacteria p.acnes como la pigmentación y enrojecimiento de la piel.

Un sistema modular. Una galaxia de tratamientos.



Versátil aplicador para tratar más de 20 afecciones de la piel y depilación.

- Trata acné, rosácea, lesiones pigmentadas y vasculares. También reduce manchas de edad a través del fotorejuvenecimiento.
- Tecnología de pulso óptimo (OPT®) controla la forma y la longitud del pulso.
- El Pulso secuencial múltiple (MSP™) permite un procedimiento más seguro mientras enfría entre pulsos.
- 9 ExpertFilters™, cambiables en segundos.
- 3 guías de luz SapphireCool™ para la comodidad del paciente a través del enfriamiento continuo por contacto.



Necesita solo una pasada para un efectivo rejuvenecimiento de la piel, ahorrando tiempo y protegiendo la piel del paciente.

- La única verdadera tecnología fraccionada no ablativa.
- Escáner CoolScan™ de última generación con enfriamiento continuo por contacto para mayor comodidad del paciente.
- Elija entre más de 600 combinaciones de forma, tamaño y densidad del área para un tratamiento óptimo, ya sea una sola lesión o toda la cara.
- Fácil visibilidad del área de tratamiento a través de la ventana del tip SapphireCool™



Para el tratamiento preciso de lesiones vasculares y venas de las piernas en todo tipo de piel.

- El pulso secuencial múltiple (MSP™) permite el enfriamiento entre pulsos. Reduciendo el riesgo de daños en la piel cuando se tratan lesiones vasculares: la serie de subpulsos permite una penetración más profunda y una mayor duración general del pulso, que es crucial durante el tratamiento.
- 3 guías de luz SapphireCool™, cambiables en segundos, para comodidad del paciente a través del enfriamiento continuo por contacto.




Tonificación de la piel con el tratamiento de lesiones pigmentadas y la eliminación de tatuajes oscuros.

- Guía de luz homogéneo "Top Hat" para mayor seguridad y eficacia del tratamiento.
- Cabezal único para todas las aplicaciones Q-Switched.
- 7 tamaños de spots para tratamientos personalizados.


Tecnología fuera de este mundo

Stellar M22 trata todos los tipos de piel, con más de 30 indicaciones de uso. Capacidad para utilizar múltiples tecnologías de vanguardia en la misma sesión de tratamiento para obtener resultados clínicos sobresalientes.

OPT® - Tecnología de pulso óptimo

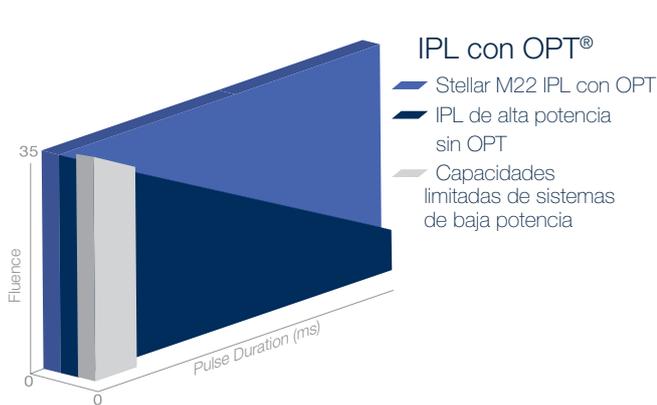

MSP™ - Pulso secuencial múltiple

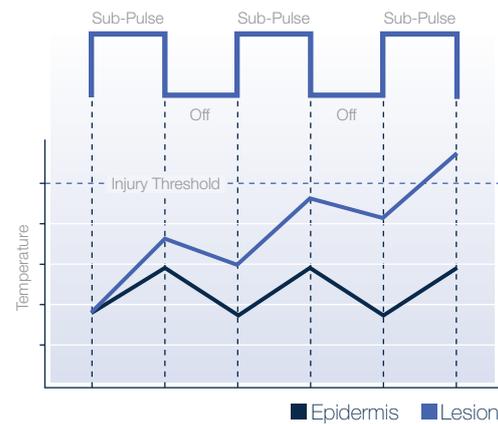

Las ventajas OPT®:

- Alto pico de potencia, pulsos más cortos: óptimo para tratamientos de piel con IPL usando el fotorejuvenecimiento y el tratamiento de lesiones pigmentadas benignas.
- Potencia homogénea sobre duraciones de pulso largas.

Tecnología MSP™:

La pulsación secuencial múltiple permite enfriar la piel entre pulsos, lo que reduce la posibilidad de daños en la piel durante los tratamientos.

Formas ResurFX™ CoolScan™

6 formas diferentes, con tamaños y densidades cambiables desde la interfaz de usuario, permiten el control y precisión del tratamiento.



Fácil de usar y de aprender.

Intuitiva interfaz de usuario, incluyendo preajustes de tratamiento.



Permita que todos brillen

Confiamos en nuestros resultados, usted también puede hacerlo

Las capacidades multiplataforma de Stellar M22 han sido validadas en numerosos estudios clínicos y artículos revisados por sus pares. Los profesionales de todo el mundo han reportado continuamente altos niveles de satisfacción del paciente y resultados repetibles.

Antes



Después 4 Tx



Tx Acne con IPL
Cortesía: Dr. Li Yuanhong.

Antes



Después



Tx Rosacea con IPL
Cortesía: Dr. Gilly Munavalli.

Antes



Después



Skin resurfacing con ResurFX
Cortesía: Dr. Matteo Tretti Clementoni

Antes



Después



Photofractional™ con IPL y ResurFX
Cortesía: Dr. Matteo Tretti Clementoni.

Antes



Después



Venas en piernas con Nd:YAG
Cortesía: Dr. Jose Miguel Montero García

Antes



Después



Tatuajes Nd:YAG Q-Switched
Cortesía: Dr. Michael Oeser.

Antes



Después



Fv, Tcl_q amí QJ
Cortesía: Dr. Matteo Tretti Clementoni.

“Cuando pienso en comprar un nuevo dispositivo, pienso en el ROI y en la rapidez con la que voy a poder pagar el dispositivo ... Y me alegró ver que **we pagamos el dispositivo en solo unos meses, ¡lo cual creo que es increíble!**”

Dra. Melanie D. Palm, MBA

Su viaje con M22™ acaba de comenzar.

Queremos que tu negocio crezca con Lumenis. Es por eso que hemos reunido un paquete de soporte que inicia con la primera conversación y permanecerá con usted a medida que su empresa comience a ver los beneficios. Nos aseguramos de que tenga toda la capacitación que necesita y de que reciba los materiales clínicos actualizados.

Nuestras actividades de marketing directo al consumidor respaldan la marca, manteniendo la solución Lumenis M22 como el tratamiento de elección cuando se trata de consumidores de todo el mundo.



Localizador de Prácticas Lumenis

Miles de pacientes buscan proveedores de tratamiento cada mes. Ayúdalos a encontrar tu clínica registrando su práctica en el Localizador de Prácticas de Lumenis. Realizamos campañas a través de personas influyentes, redes sociales y videos virales para promover este directorio.



Lumenis en línea

Los consumidores tienen muchas preguntas sobre estética. Nuestros sitios web para pacientes les darán la seguridad y la confianza que necesitan para seguir adelante con los tratamientos.



Equipo de entrenamiento

Instalamos el sistema y capacitamos a su personal, para crear el plan de tratamiento perfecto para cada paciente individual. Nuestro entrenamiento clínico experto significa que manejarán consultas y tratamientos con confianza.



Su recurso más valioso.

Queremos que se sienta parte de la familia Lumenis, así que no dude en contactarnos en cualquier momento. Siempre haremos todo lo posible para responderle dentro de las 24 horas hábiles.



La marca de tu clínica

Le ofrecemos materiales como folletos y carteles. También tendrá acceso a una gran cantidad de información clínica y de productos.



Amplia red de servicios

Estamos comprometidos a proporcionar un servicio integral y de alta calidad para la reparación y mantenimiento de equipos médicos

Especificaciones

Universal IPL™

Espectro	400-1200 nm
Filtros ExpertFilters	Acne (400-600 & 800-1200); 515 nm; Vascular (530-650 & 900-1200); 560 nm; 590 nm; 615 nm; 640 nm; 695 nm; 755 nm
Fluencia	8 x 15 mm - hasta 35 J/cm ² 15 x 35 mm - hasta 35 J/cm ² 6 mm redondo - hasta 56 J/cm ²
Duración de pulso	4-20 ms
Delay de pulso	5-150 ms
Característica del pulso	(Pulsado Múltiple Secuencial)
Frecuencia de repetición	hasta 1 Hz
Tamaño de spot	35 x 15 mm ² ; 15 x 8 mm ² , 6mm
Enfriamiento	Por contacto continuo

MultiSpot™ Nd:YAG

Longitud de onda	1064 nm
Fluencia	10-225 J/cm ²
Duración del pulso	2-20 ms
Retardo del pulso	5-100 ms
Característica del pulso	(Pulsado Múltiple Secuencial)
Frecuencia de repetición	hasta 1 Hz
Tamaño de spot	6 mm; 2 x 4 mm ² ; 9 mm
Enfriamiento	Por contacto continuo

ResurFX™

Longitud de onda.	1.565 nm.
Energía del pulso.	10 a 70 mJ por microhaz.
Característica del pulso.	Escáner CoolScan.
Formas de patrón.	Línea, cuadrado, rectángulo, círculo, dona y hexágono.
Densidad del haz.	Hasta 500 microhaces/cm ²
Frecuencia de repetición.	0,5 a 2 Hz.
Tamaño de spot.	Hasta 18 mm.
Enfriamiento.	Por contacto continuo.

Q-Switched Nd:YAG

Longitud de onda.	1064 nm
Fluencia.	0.9-14 J/cm ²
Duración del pulso.	6-8 nseg
Característica del pulso.	Top-Hat
Frecuencia de repetición.	0.5-5.0 Hz
Tamaño de spot.	2; 2.5; 3.5; 4; 5; 6 and 8 mm

Especificaciones del sistema

Medidas [sin ResurFX]	51 X 56 X 52cm
Medidas [con ResurFX]	51 X 56 X 65 cm
Peso [sin ResurFX]	40 kg
Peso [con ResurFX]	55 kg
Requisitos eléctricos	Línea monofásica dedicada de 100 – 240 V CA ±10%, 15 A máx., 50/60 Hz

Advertencias y riesgos.

Al igual que con cualquier láser o IPL, se debe tener el cuidado adecuado para garantizar un uso seguro y adecuado.

El manual del operador de Stellar M22 debe revisarse y entenderse a fondo antes de utilizar este instrumento. Stellar M22, incluido el Stellar IPL, Multi-Spot Nd: YAG, Q-Switched Nd: YAG y ResurFX, está contraindicado para pacientes con infección activa, enfermedades virales, fúngicas o bacterianas. También está contraindicado para pacientes con trastornos de la piel o afecciones inflamatorias de la piel. Tenga en cuenta que IPL / Laser puede causar lesiones epidérmicas. El riesgo aumenta con mayor fluencia / energía y pigmentación de la piel. El uso de Stellar M22 podría causar enrojecimiento, hinchazón, cambio de pigmentación y cicatrización. Consulte el manual del usuario del sistema para obtener una lista completa de contraindicaciones y riesgos.

adisat.com/lumenis/stellar



El Grupo de Empresas Lumenis. Lumenis, su logotipo, Stellar M22, Stellar IPL, OPT, pulso secuencial múltiple, ExpertFilters, guías de luz SapphireCool, Photofractional, ResurFX y CoolScan son marcas comerciales o marcas comerciales registradas del Grupo de Empresas Lumenis. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso Lumenis tiene la certificación ISO 13485: 2012.



Rx ONLY



Lumenis Ltd.

Yokneam Industrial Park
Hakidma Street 6, P.O.B. # 240
Yokneam 2069204, ISRAEL
Tel: +972 4 959 9000